

Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Terapia Aerosol

Modelo #: _____
Serie #: _____
Fecha: _____

Proveedor: _____
Tel #: _____
Contacto: _____

Preparando el equipo:

- Coloque el nebulizador sobre una base firme y plana
- Arme el nebulizador
- Conecte el tubo a la máquina y al frasco (Diagrama 1)
- Ponga la medicina en el frasco
- Ponga la conexión en T en el nebulizador



← Boquilla



← Tapa de
Nebulizador




← Nebulizador



← Frasco

Diagrama 1

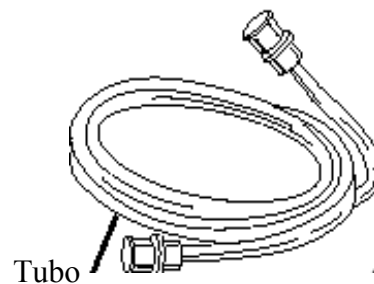

Tubo

Usando su equipo:

1. Conecte la cuerda eléctrica a un enchufe de 3 agujeros. Asegúrese que la máquina esté apagada (“OFF” en inglés).
2. Ponga la medicina en el frasco y conecte el tubo a la máquina.
3. Prenda la máquina (“ON”) y la medicina se convertirá en vapor.
4. Respire despacio y profundo, guardando el vapor en sus pulmones de vez en cuando. Continúe hasta que se acabe la medicina.
5. Cuando termine con el tratamiento, apague la máquina y desarme el nebulizador.

Procedimientos especiales:

- Si está usando un nebulizador portátil, consulte el manual para procedimientos de tratamiento.

Artículos de reemplazo frecuente:


- Equipo de nebulizador aproximadamente cada 2 semanas.
- Filtros del compresor.

Asuntos de seguridad:

- Consulte con su médico en cuanto a cualquier sensibilidad a un medicamento y para asegurar que la medicina es compatible con la que usted toma actualmente.
- No continúe con el tratamiento si le sube su pulso a más de 30 por minuto. Hable con su médico.
- No continúe con el tratamiento si usted experimenta temblores. Descanse unos momentos y vuelva a intentar. Si persiste la sensación, hable con su médico.
- Revise la fecha de su medicina, no la use si está vencida.

Mantenimiento:

- Desarme y enjuague el nebulizador después de cada tratamiento y póngalo sobre una toalla de papel limpio. Después de su último tratamiento del día, lave con agua jabonosa todas las partes y déjelas en una solución de 1 parte de vinagre y 3 partes de agua por 30 minutos y después enjuáguelas.
- Se puede usar un desinfectante comercial para lavar su nebulizador en vez de vinagre y agua. Siga las instrucciones del paquete. Se puede guardar esta solución por 30 días. Siempre enjuague su equipo después de lavarlo.
- Cambie el filtro del compresor cuando el material pierda su color.

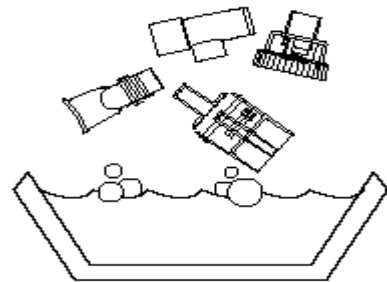

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su Proveedor Local:

©Copyright The VGM Group 2004



B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical