



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo *Bomba de Nutrición Enteral*

Modelo #: _____ Proveedor: _____
Serie #: _____ Tel #: _____
Fecha: _____ Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Uso en casa:
 - Llene la bolsa y cuélguela en el palo. (Foto 1)
 - Conecte el tubo a la bomba. (Foto 2)
 - Asegúrese que el aparato esté apagado antes de conectarlo al enchufe.
 - Conecte el aparato a un enchufe de 120V.
- Ambulante:
 - Asegúrese que esté cargada la pila.
 - Llene la bolsa. (Foto 3)
 - Conéctela a la bomba.
 - Póngala en la bolsa ambulante.

Foto 1

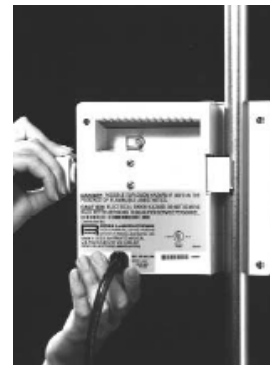



Foto 2



Foto 3



Foto 4

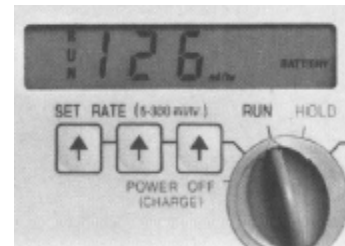

Usando su equipo:

- Mueva el cuadrante a la posición de “set rate” (ajustar razón) y ajústela con las flechas. (ml/hr). (Foto 4)
 - Localice la dosis correcta y ajuste de acuerdo a las instrucciones.
 - Empuje y gire el cuadrante a la posición de “run” (funcionar).
- * Si no llena el producto junto a la cama, sería aconsejable cerrar la grapa antes de transportarlo.
- * Asegúrese que la grapa esté abierta para alistar y usar el equipo.



Foto 5



Foto 6



Artículos de reemplazo frecuente:

- Tubo (Foto 5)
- Bolsas de alimento (Foto 6)

Procedimientos especiales:

- Bomba ambulante:
 - Hay que tener la bolsa ambulatoria correcta para que su bomba y bolsa de alimento funcionen correctamente. Las marcas pueden tener diseños diferentes. Consulte las instrucciones para colocación de la bomba y bolsa.
 - Una bomba nueva debe ser conectada a un enchufe antes de su primer uso por el tiempo especificado para asegurar que se cargue bien la pila.

Asuntos de seguridad:

- Cuando suena la alarma:
 - Asegúrese que no esté doblado el tubo.
 - Asegúrese que la bolsa no esté vacía (no use la bomba con una bolsa vacía).
 - Asegúrese que la pila no este descargada.
 - Asegúrese que no hay ninguna obstrucción en el tubo, mueva la grapa para asegurarse que esté abierta completamente.
 - Asegúrese que la cámara de gotas no esté llena mas de $\frac{1}{4}$ o cubierta con el producto.
 - Asegúrese que todas las bolsas y tubos sean compatibles con su bomba.

Mantenimiento:

- Se puede limpiar la bomba por fuera con agua jabonosa.
- Se puede limpiar la cavidad de la bomba con algodón o una toalla suave y agua jabonosa. **NO USE ALCOHOL PARA LIMPIARLA.**
- La bomba debe estar en la posición apagada (OFF) o cargar pila (CHARGE), si sea aplicable, cuando no esté en uso.
- **NO SE PUEDE SUMERGIR O PONER EN UN AUTOCLAVE a la bomba o cargador.**

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical