



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo


Cama de Hospital

Modelo #: _____ Proveedor: _____
Serie #: _____ Tel #: _____
Fecha: _____ Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Su técnico de entrega armará su cama y probará el conductor a tierra del enchufe. El técnico regresará después del tratamiento para remover la cama.
- Conecte el cable al enchufe.
- Coloque el cable en un lugar seguro para evitar caídas.
- Verifique que los cables del enchufe y del control remoto funcionan correctamente.

Diagrama 1
Control Remoto

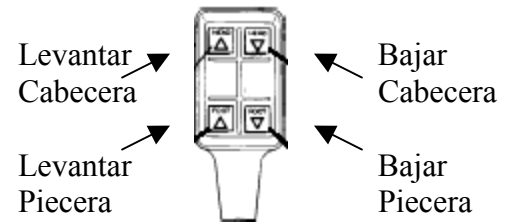

Usando su equipo:

- Su técnico demostrará o explicará el uso del control remoto para levantar / bajar la cabecera y/o piecera. (Diagrama 1) (Y/O)
- Su técnico explicará cómo usar el manubrio para levantar y bajar la cama. (Diagrama 2)


Barandas/Barandas de sección media

- Su técnico explicará cómo levantar y bajar las barandas. (Diagrama 3)

Trapezio (si es necesario)

- El técnico explicará y demostrará cómo ajustar la barra del trapezio y la altura del trapezio. (Diagrama 4)
- La capacidad máxima del trapezio son 250 libras (113 kilos) (asistida por el paciente).

Diagrama 2

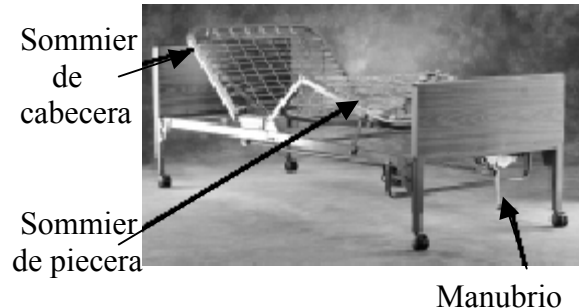

Mantenimiento/Puntos de inspección:

- Colchón – revise anualmente
- Verifique que todos los resortes del sommier están intactos.
- Inspeccione la cabecera y piecera por huecos, rajaduras, o filos agudos.
- Revise la cama por gastos o daños generales.
- Póngase en contacto con su proveedor de equipo para mantenimiento o partes.
- Revise el motor y los cables regularmente para ver que estén funcionando correctamente y que no estén gastados.



Mantenimiento:

- Use limpiadores comunes de casa para la limpieza general y regular.
- Llame a su proveedor si su equipo deja de funcionar.

Localización de averías:

<u>Problema</u>	<u>Causa</u>	<u>Solución</u>
No se baja la cama eléctrica	Cama desconectada del enchufe o conexión floja	Conecte el cable al enchufe completamente
	El control remoto está flojo o desconectado del armazón	Conecte el cable del control completamente
	Se fue la luz	Use el manubrio

Asuntos de seguridad:

- Mantenga todas las partes móviles, incluyendo el armazón principal, plataforma del colchón y ejes impulsores libres de obstrucciones (por ejemplo mantas, sábanas, tubos y otros tipos de productos que podrían enredarse en la cama).
- Al transferirse a/de la cama, **siempre** use los frenos.
- Siempre pruebe las barandas para asegurarse que están en su lugar correctamente y seguras antes de usar la cama. (Diagrama 3)
- Nunca use el trapecio para apoyar todo su peso. (Diagrama 4)
- Nunca use la cama si el cable está dañado. Si la cama no funciona correctamente, llame a su proveedor de equipo inmediatamente.
- Si usa barandas en su cama, evite huecos entre el colchón y las barandas donde puede lastimarse el cuerpo. El tamaño propio y/u orillas levantadas del colchón podrían impedir huecos.

Barandas

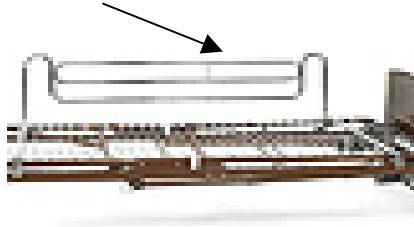


Diagrama 3

Trapecio

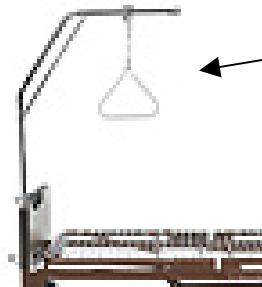


Diagrama 4

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004
B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of
Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil,
Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross,
Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical