



Lecciones Básicas para Entender Su Equipo

Succión Traqueal

Modelo #: _____ Proveedor: _____
Serie #: _____ Tel #: _____
Fecha: _____ Contacto: _____

Preparando su equipo:

- Coloque la máquina de succión en una superficie plana.
- Conecte el cable a un enchufe de 3 agujeros.
- Conecte el tubo a la máquina.
- Conecte el catéter de succión o catéter de tonsila al tubo.
- Prenda la máquina. (“ON”)

Usando su equipo:

- Con la máquina en una superficie plana, use el indicador de vacío para fijar el nivel de resistencia del vacío.
- Administre la succión tal como demostró su técnico de entrega y recetada por su médico.


Artículos de reemplazo frecuente:

- Catéter de succión
- El tubo de succión y la botella de colección (Diagrama 2)

Diagrama 2



Diagrama 1

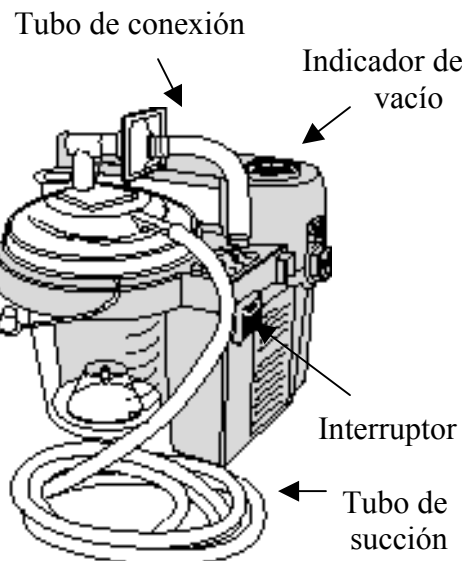

Procedimientos especiales:

Para la succión endotraqueal –

- Lave sus manos.
- Abra el equipo del catéter de succión.
- Prepare la fuente de oxígeno. (si es aplicable)
- Abra el agua estéril o solución salina isotónica.
- Llene el receptáculo con agua estéril o solución salina isotónica.
- Póngase un guante estéril en una mano y un guante no estéril en la otra mano.
- Usando la mano con el guante estéril, agarre la succión en la punta que tiene la abertura de control.
- Conecte el catéter de succión al tubo usando la mano con el guante no estéril. Mantenga los dedos libres de la abertura de succión.
- Usando la mano con el guante no estéril, prende la máquina de succión. (ON)
- Manteniendo los dedos libres de la abertura de succión, introduzca suavemente el catéter por la ruta apropiada. (tubo o tubo traqueal) Una vez que encuentra la resistencia, retrae el catéter 1-2 cm y empiece a administrar la succión por cubrir intermitentemente la abertura de succión.
- Administre la succión intermitentemente mientras remueve el catéter. Ruede el catéter mientras lo remueve. Limite la duración de succión a menos de 15 segundos.
- Una vez que remueva el catéter, enjuague el catéter y tubo por succionar agua estéril y/o solución salina isotónica.
- Desconecte el catéter del tubo, quítese el guante y bótelos con el catéter y equipo.
- Lave sus manos.
- Anote la densidad, color y cantidad de las secreciones.

Mantenimiento:

- Lave el receptáculo de colección diariamente con agua caliente jabonosa, enjuagándolo en agua tibia.
- Lave el tubo usando 1 parte de vinagre blanco destilado y 2 partes de agua de la llave. Succione esta solución con el tubo al receptáculo de succión.
- Enjuague el tubo con agua limpia y deje que las partes se sequen al aire.

Asuntos de seguridad

- No use niveles de succión más altos que los recetados.
- Asegure que la máquina esté conectada a un enchufe de 3 agujeros.
- Llame a su proveedor con cualquier defecto de partes o si funciona mal.

Favor de comunicarse con su proveedor de equipo para reparaciones, ajustamientos, o preguntas.

Su proveedor local:



©Copyright The VGM Group 2004

B.L.U.E. Sheet photos, drawings, and text courtesy of Golden Technologies, Invacare, Leisure-Lift, Permobil, Puritan Bennett, Pride, Respironics, Ross, Sammons Preston, Smith-Nephew, Sunrise Medical